

большой шаг маленькой ножки...





Родители, выбирая обувь для своих малышей, задумываются, какие ботинки им подойдут для ходьбы по дороге. И довольно часто они не обращают внимания на то, в чем дети ходят основное свое время дома или детском саду...

DANIEL является обувью, которая соответствует ожиданиям заботящихся родителей, желающих провести оздоровительную профилактику для своего ребенка. Это первая профилактическая обувь для детей, которая идеально подходит в качестве домашней обуви, сменной обуви и в солнечные дни для прогулки. Удобная конструкция профилактической обуви DANIEL создает ребенку комфорт и удобство во время ношения. Она позволяет стопе и суставом правильно развиваться.



## О КОМПАНИИ

Компания DANIEL является производителем профилактической обуви „Danielki“. Она предлагает детскую обувь, которая имеет сертификаты, выданные Институтом Кожевенной Промышленности в Кракове.

Компания начала свою деятельность в 1993 году и с первых дней она занимается совершенствованием своей продукции для того, чтобы наши маленькие клиенты чувствовали себя комфортно в нашей обуви.


**“ЭТО ЗДОРОВЬЕ И ТРАДИЦИИ. ОБУВЬ DANIEL  
- ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТЛИЧНАЯ ОБУВЬ”**

*именно так комиссия специалистов отдела детской обуви  
ИКП в Кракове выразила свое мнение об обуви Daniel*

**БЕЗОПАСНАЯ  
ПЯТКА И ЩИКОЛОТКА**  
высокая берца в меру уплотненная  
и выполненная  
из натуральной кожи

**ДЫШАЩИЕ СТОПЫ**  
мягкий велюровый верх  
с отличными  
гигиеническими  
свойствами

**ПОДОШВЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
КАБЛУКА THOMASA**  
Удобная оздоровительная  
подошва с эффектом  
натуральной подкладки

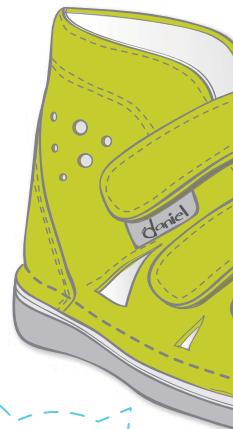

# ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ – КОНСТРУКЦИЯ

Всей конструкции можно дать короткое определение: „Здоровье и добрые традиции“, потому что:

- уже на стадии проектирования моделей мы подумали о размерах и форме стоп польских детей. Обувь изготавливается на колодках с широким и высоким носком, благодаря чему радиально расположенные пальцы ребенка находят для себя соответствующее пространство;
- шнуровка, застежки на „липучках“ являются отличным способом для правильного подбора обуви, как худой, так и полной ножки;
- велюр – натуральная кожа, отлично поглощающая пот, который выделяет стопа ребенка, даже при самых активных нагрузках способствует правильному процессу терморегуляции. Сочетание велюрового верха с подкладкой из натуральной кожи повышает поглощающую способность всей материальной системы. Перфорация (отверстия любого вида в берце) ускоряет удаление излишней влаги из поверхности стопы. Благодаря таким свойствам обувь можно применять, как в качестве выходной, так и домашней.
- особая технология выполнения подошв, которая заключается в надрезах на линии плюснефаланговых суставов, правильно изгибает обувь во время ходьбы и вместе с этим повышает гибкость низа обуви;
- очень легкая подошва из микроячеичной пенорезины, повышающей гибкость во время пользования, легко приспосабливается к подвижности ребенка;
- оптимальной высоты берец, уплотненный эластичный задник, ставят пятку в правильную позицию.

## ИДЕАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


Регулируемые застежки позволяют подобрать обувь к разной форме стопы, удобные, даже, когда будет вложена специальная ортопедическая стелька

## КОМФОРТ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ

Широкий, высокий носок позволяет свободно двигаться пальцам

## НАТУРАЛЬНАЯ СТЕЛКА

профилированная стелька выполнена из мягкой пенки, которая сверху покрыта кожей

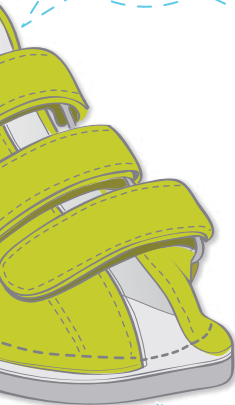

*„Примеряв первую пару,  
она не хотела  
уже их снимать...“  
мама 2-летней Оливии*





## ПРИМЕНЕНИЕ:

Профилактическая обувь „Danielki“ рекомендуется для детей с целью предотвращения возникновения анатомических дефектов нижних конечностей, таких как:

- вальгусная деформация колен (X-образные),
- вальгусная деформация стоп,
- варусная деформация стоп,
- плосковальгусная деформация стоп
- вялые стопа,
- продольное плоскостопие,
- поперечное плоскостопие,
- вальгусная деформация пальца,
- когтеобразные пальцы.

Рекомендуется носить здоровым детям с той целью, чтобы не допустить возникновения вышеперечисленных дефектов стоп. После применения соответствующих ортопедических стелек, которые подбирает врач-ортопед, „Danielki“ могут применяться при консервативном лечении вышеупомянутых дефектов.



## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- нельзя пользоваться обувью детям с поврежденной кожей, открытыми ранами, язвой и другими кожными заболеваниями. Открытую рану или раздражение кожи необходимо перебинтовать.
- нельзя пользоваться обувью детям, имеющим аллергию на кожу животных, из которой изготавливается обувь.
- в случае появления обширного раздражения на коже стопы необходимо проконсультироваться с врачом-дерматологом или педиатром.
- в случае выявления врожденных или приобретенных дефектов нижних конечностей у ребенка необходимо проконсультироваться с врачом-ортопедом или педиатром.







## СЕРТИФИКАТЫ И МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ


DANIEL, заботясь о своих маленьких клиентах и их здоровых стопах, обратился к ИКП в Кракове (ранее ЦЛОП) с целью исследовать продукцию. Комиссия специалистов отдела детской обуви написала о ней коротко:

**„ЗДОРОВЬЕ И ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ“**



Знак „ЗДОРОВАЯ СТОПА“ — обувь, которая обеспечивает правильное развитие и функционирование стопы ребенка.

Обувь, обозначенная знаком „ЗДОРОВАЯ СТОПА“, считается правильно изготовленной с точки зрения конструкции, технологии и материалов, а также эстетического вида. Право пользоваться знаком „ЗДОРОВАЯ СТОПА“ присуждает Комиссия Специалистов отдела Детской Обуви ИКП, Отделение в Кракове, подтверждая свое решение сертификатом. Обувь оценивает ортопед, антрополог, конструктор обуви, технолог по материалам.

 Обувь типа „DANIELKI“ получила положительное заключение в Кафедре Детской Ортопедии Клиники Детской Ортопедии и Реабилитации при Медицинском Университете в Люблине:

„(...) с ортопедической точки зрения — предоставленная обувь является полностью правильной и очень полезной. Она соответствует всем требованиям с точки зрения ортопедических потребностей для детской стопы. Данная обувь является профилактической для широких групп польских детей“.

Фрагмент оценки, который оставил Ортопедический Специалист, мед. д-р Томаш Карски, 15.03.2012

## для ПРОДАВЦОВ

Рекомендации относительно правильного подбора размера по ноге ребенка

- во время примерки обуви ребенок должен стоять на обеих ногах в примеряемой обуви
- большой палец должен находиться на расстоянии 0,5–0,8 см от шва, если разница больше – обувь будет слишком свободной, что может сопровождаться натиранием пяток, а также обувь не сможет выполнять своих функций
- обувь на шнурках, также как и на липучках, должна быть правильно завязанной, чтобы берца хорошо прилегала к ноге ребенка



модель 405 / 415

доступные размеры: 18 – 26  
27 – 32

цвета: \*



\* цвета могут отличаться от фактических цветов обуви/полная гамма цветов у производителя



модель 425 / 435

доступные размеры: 18 – 26  
27 – 32



цвета: \*



\* цвета могут отличаться от фактических цветов обуви/полная гамма цветов у производителя



модель 404 / 414

доступные размеры: 18 – 26  
27 – 32



цвета: \*



\* цвета могут отличаться от фактических цветов обуви/полная гамма цветов у производителя



модель 424 / 434

доступные размеры: 18 – 26  
27 – 32



цвета: \*



\* цвета могут отличаться от фактических цветов обуви/полная гамма цветов у производителя



модель 50 / 51

доступные размеры: 18 – 26  
27 – 32



цвета: \*



гранатовый



оливковый



голубой



джинсовый

\* цвета могут отличаться от фактических цветов обуви/полная гамма цветов у производителя





модель 52 / 53

доступные размеры: 18 – 26  
27 – 32



цвета: \*



\* цвета могут отличаться от фактических цветов обуви/полная гамма цветов у производителя





модель 56

доступные размеры: 18 – 26  
27 – 32



цвета: \*



гранатовый



оливковый



голубой



джинсовый



фиолетовый

\* цвета могут отличаться от фактических цветов обуви/полная гамма цветов у производителя



модель 58

доступные размеры: 18 – 26  
27 – 32

цвета: \*



гранатовый



красный



оливковый



голубой

\* цвета могут отличаться от фактических цветов обуви/полная гамма цветов у производителя





**P P H U Daniel**  
**Ewa Krupińska Mirosław Krupiński**  
Targówka, ul. Mazowiecka 79,  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
nr tel.: 25 759 25 38 / fax.: 25 759 19 75  
e-mail: [danielobuwie.pl@epoczta.pl](mailto:danielobuwie.pl@epoczta.pl)  
[www.danielobuwie.pl](http://www.danielobuwie.pl)